



# ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

Инструкция по эксплуатации

Модель: **BS-S40**



Внимательно прочтите данную инструкцию перед первым использованием, чтобы ознакомиться с работой нового прибора. Используйте прибор только по прямому назначению. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейших справок.

## **ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ**

- ЖК-дисплей
- Платформа из закаленного стекла
- Автоотключение (10 секунд)
- Максимальный измеряемый вес - 150 кг
- Индикация перегрузки
- Индикация разряда батареи

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Устройство предназначено для использования только в бытовых целях. Прибор не предназначен для коммерческого или промышленного применения.
- Если изделие некоторое время находилось при отрицательной температуре, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Внимание! Не становитесь на весы, если поверхность весов или ноги мокрые - опасность поскользнуться!
- Не прыгайте на весах.
- Не перегружайте весы.
- Предохраняйте прибор от падения и ударов.
- Не бросайте на весы посторонние предметы.
- Не держите и не храните на весах посторонние предметы.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь весов, т.к. это может привести к поломке.
- При попадании в пищеварительный тракт батареек могут представлять опасность для жизни.

- Храните батарейки и весы в недоступном для детей месте. Лицу, проглотившему батарейку, следует незамедлительно обратиться к врачу.
- Запрещается заряжать или иными способами восстанавливать батарейки, разбирать их, бросать в огонь.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. В случае неисправности обращайтесь в сервисный центр.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра. Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, с физическими, нервными и психическими нарушениями или при отсутствии у них опыта или знаний. Использование прибора такими лицами допускается лишь в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, при условии, что им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

## **НАЧАЛО РАБОТЫ**

- Весы работают от батареек 2 x 1.5 В типа AAA или CR2032 (в зависимости от модели).
- Откройте крышку отсека для батареек в основании весов, вытащите защитную пленку, затем закройте отсек.
- Переключателем, расположенным в основании весов в отсеке для батареек, выберите единицы измерения веса “Kg” (килограммы) или “Lb”.
- Закройте отсек для батареек.
- Устанавливайте весы на плоскую, ровную и твердую горизонтальную поверхность. Не устанавливайте весы на ковер или мягкие поверхности.

## **ВЗВЕШИВАНИЕ**

- Осторожно встаньте на весы, стойте прямо и неподвижно.
- Весы включаются автоматически.
- Стойте несколько секунд, пока на дисплее не отобразится Ваш вес и цифры будут мигать. Медленно сойдите с весов.
- Весы выключатся автоматически через 6-10 секунд.

## **СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ НА ДИСПЛЕЕ**

ERR - перегрузка. Вес превышает максимально допустимый вес для взвешивания.

LO - батареи разряжены, замените на новые соблюдая полярность.

Если дисплей показывает сообщение об ошибке, дождитесь пока прибор не отключится. Включите его заново, чтобы перезапустить операцию. Если сообщение об ошибке не пропало, выньте батарейки из отсека для батареек на 10 секунд, после чего вставьте их обратно и включите прибор.

## ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Протрите весы мягкой тканью, слегка увлажненной мыльной водой, и просушите.
- Не применяйте органические растворители, агрессивные химические вещества и абразивные средства.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Автоотключение - 10 секунд
- Максимальный измеряемый вес - 150 кг
- Срок службы устройства – 3 года


Технические характеристики и комплект поставки могут отличаться от приведенных в настоящей «Инструкции по эксплуатации» вследствие модернизации изделия.

Импортер: ООО «НТТ», 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, офис 707

Изготовитель: НИНГБО ПРАЙД ИМП. ЭНД ЭКСП. КО.,ЛТД  
Китай, провинция Чжэцзян, Нингбо, Йинжоу, Джучай роуд, 99,  
бизнес корпус А  
оф.207-1

Сделано в Китае.

Дата изготовления содержится в серийном номере, расположенном на корпусе изделия:

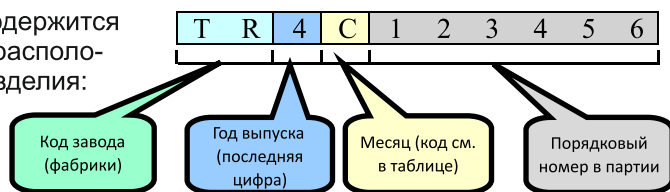

**EAC**

| Месяц года | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
|------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| Код месяца | A    | B    | C    | D    | E   | F    | G    | H    | J    | K    | L    | M    |