



ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ

Инструкция по эксплуатации

Модель: **BS-SA56**



Внимательно прочтите данную инструкцию перед первым использованием, чтобы ознакомиться с работой нового прибора. Используйте прибор только по прямому назначению. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейших справок.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- Измерение содержания жира, воды, мускульной массы и костной массы
- Шаг измерения жира и воды - 0,1%
- Диапазон измерения содержания жира: 5%...50%
- Диапазон измерения содержания воды: 20%...70%
- Память 10 значений для 10 пользователей
- Большой ЖК-дисплей
- Платформа из закаленного стекла
- Автоотключение (10 секунд)
- Максимальный измеряемый вес - 150 кг
- Индикация перегрузки
- Индикация разряда батареи

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство предназначено для использования только в бытовых целях. Прибор не предназначен для коммерческого или промышленного применения.
- Если изделие некоторое время находилось при отрицательной температуре, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Внимание! Не становитесь на весы, если поверхность весов или ноги мокрые - опасность поскользнуться!
- Не прыгайте на весах.
- Не перегружайте весы.
- Предохраняйте прибор от падения и ударов.
- Не бросайте на весы посторонние предметы.
- Не держите и не храните на весах посторонние предметы.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь весов, т.к.

это может привести к поломке.

- **Запрещается пользоваться весами лицам с медицинскими имплантатами (например, со стимуляторами ритма сердца). В противном случае могут произойти сбои в работе имплантатов.**

- **Не использовать во время беременности.**

- При попадании в пищеварительный тракт батарейки могут представлять опасность для жизни.

- Храните батарейки и весы в недоступном для детей месте. Лицу, проглотившему батарейку, следует незамедлительно обратиться к врачу.

- Запрещается заряжать или иными способами восстанавливать батарейки, разбирать их, бросать в огонь.


- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. В случае неисправности обращайтесь в сервисный центр.

- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра. Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, с физическими, нервными и психическими нарушениями или при отсутствии у них опыта или знаний. Использование прибора такими лицами допускается лишь в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, при условии, что им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.

- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

ОПИСАНИЕ

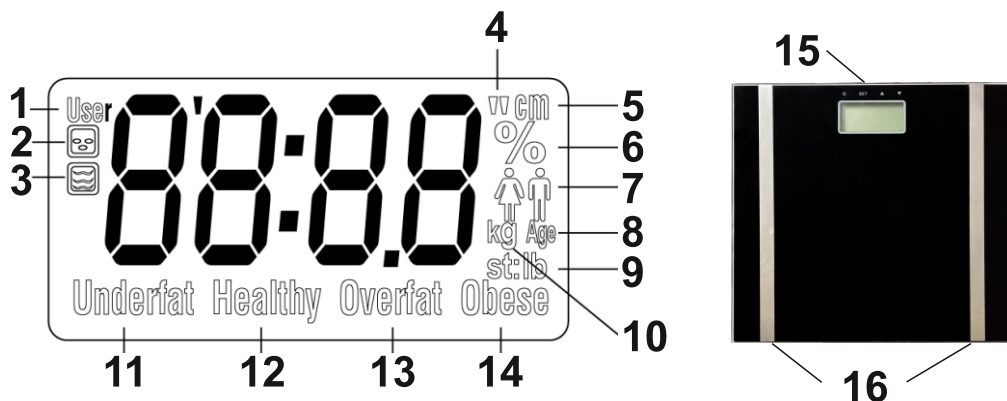

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. Пользователь | 10. Килограммы |
| 2. Процент жира | 11. Жир меньше нормы |
| 3. Процент воды | 12. Здоровый (в норме) |
| 4. Дюймы | 13. Жир выше нормы |
| 5. Сантиметры | 14. Ожирение |
| 6. Проценты | 15. Сенсорные кнопки управления |
| 7. Пол пользователя | 16. Электроды |
| 8. Возраст | |
| 9. st & lb | |

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Весы работают от батареек 2 x 1.5 В типа AAA.
- Откройте крышку отсека для батареек в основании весов, вытащите защитную пленку, затем закройте отсек.
- Затем, после включения весов, нажатием кнопки “UNIT” в основании весов выберите единицы измерения веса “Kg” (килограммы) или “Lb”.
- Устанавливайте весы на плоскую, ровную и твердую горизонтальную поверхность. Не устанавливайте весы на ковер или мягкие поверхности.
- Не устанавливайте и не храните весы рядом с источниками электро-магнитного излучения, такими как СВЧ-печи, мобильные телефоны и т.д., поскольку это может нарушить работу чувствительных электронных компонентов весов.

ВЗВЕШИВАНИЕ

- Нажмите кнопку включения весов «**ON**» и дождитесь, пока на дисплее отобразятся цифры «0.0».
- Медленно поставьте на весы одну ногу, затем другую. Встаньте прямо.
- Стойте несколько секунд, пока на дисплее не отобразится Ваш вес и цифры будут мигать. Медленно сойдите с весов.

НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ДАННЫХ

- Для проведения анализа процентного содержания воды и жира в организме следует сначала задать свои параметры: пол, возраст, рост.
Весы могут хранить данные для 10 пользователей.
- Нажмите кнопку включения весов «**ON**» и дождитесь, пока на дисплее отобразятся цифры «0.0».
- Нажмите кнопку **SET**, на дисплее начнет мигать номер пользователя от 01 до 10, появится слово “USER” и символ мужчины или женщины.
- Кнопками **ВВЕРХ** / **ВНИЗ** установите номер пользователя и нажмите кнопку **SET**.
- Начнет мигать символ мужчины или женщины.
- Кнопками **ВВЕРХ** / **ВНИЗ** выберите соответствующий символ мужчины или женщины и нажмите кнопку **SET**.
- Начнет мигать символ установки возраста “Age”.
- Кнопками **ВВЕРХ** / **ВНИЗ** установите возраст и нажмите кнопку **SET**.
- Начнет мигать значение установленного роста в сантиметрах или футах и дюймах, в соответствии с установленными единицами измерения веса “Kg” (килограммы) или “Lb”.
- Кнопками **ВВЕРХ** / **ВНИЗ** установите рост и нажмите кнопку **SET**.
- Данные пользователя занесены в память. Дождитесь появления на дисплее цифр «0.0», затем весы выключатся. Повторите данную процедуру для других пользователей.

ДИАГНОСТИКА

После настройки пользовательских данных можно проводить диагностическое взвешивание с определением процентного содержания воды и жира в организме.

- Нажмите кнопку включения весов « **ON** » и дождитесь, пока на дисплее отобразятся цифры « 0.0 ».
- Нажмите кнопку SET, на дисплее начнет мигать номер пользователя от 01 до 10.
- Кнопками ВВЕРХ / ВНИЗ выберите Ваш номер пользователя, затем дождитесь появления на дисплее цифр « 0.0 ».
- Встаньте на весы босыми ногами, стойте прямо и неподвижно.
- Внимание! Во время измерения не должно быть контакта между обеими ступнями, икрами, голеньями и бедрами. В противном случае показания будут некорректны. Ступни ног не должны быть чрезмерно сухими для обеспечения контакта с электродами весов.
- Сначала на дисплее начнут мигать показания измеренного веса. Подождите несколько секунд.
- Затем на дисплее будет показан процент содержания жира с соответствующим символом, и примерный анализ - Недостаток, Норма, Избыток, Излишний вес.
- Затем на дисплее будет показан процент содержания воды в организме с соответствующим символом.
- Все три показания - веса, процентные содержания жира и воды - будут отображаться поочередно, затем весы выключатся автоматически.

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ НА ДИСПЛЕЕ

EEEE - перегрузка. Вес превышает максимально допустимый вес для взвешивания.

Err - результаты измерения содержания воды и жира выходят за допустимые пределы.

LO - батареи разряжены, замените на новые соблюдая полярность.

Если дисплей показывает сообщение об ошибке, дождитесь пока прибор не отключится. Включите его заново, чтобы перезапустить операцию. Если сообщение об ошибке не пропало, выньте

батарейки из отсека для батареек на 10 секунд, после чего вставьте их обратно и включите прибор.

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Протрите весы мягкой тканью, слегка увлажненной мыльной водой, и просушите.
- Не применяйте органические растворители, агрессивные химические вещества и абразивные средства.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Шаг измерения жира и воды - 0,1%
- Диапазон измерения содержания жира: 5%...50%
- Диапазон измерения содержания воды: 20%...70%
- Автоотключение - 10 секунд
- Максимальный измеряемый вес - 150 кг
- Срок службы устройства – 3 года

Технические характеристики и комплект поставки могут отличаться от приведенных в настоящей «Инструкции по эксплуатации» вследствие модернизации изделия.

Импортер: ООО «НТТ», 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, офис 707

Изготовитель: НИНГБО ПРАЙД ИМП. ЭНД ЭКСП. КО.,ЛТД
Китай, провинция Чжэцзян, Нингбо, Йинжоу, Джучай роуд, 99, бизнес корпус А
оф.207-1

Дата изготовления содержится в серийном номере, расположенном на корпусе изделия:

T R 4 C 1 2 3 4 5 6

Сделано в Китае.

Код завода (фабрики)

Год выпуска (последняя цифра)

Месяц (код см. в таблице)

Порядковый номер в партии

EAC

Месяц года	Янв	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июнь	Июль.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Код месяца	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M